

キャップをしたまま飲める  
たおれてもこぼれない


Kiss II  
ペットボトルタイプ



aha projects  
by I.C.I DESIGN

## 取扱説明書

ご使用前に必ずよくお読みの上  
正しくお使いください。  
また、いつでも見られる場所に  
大切に保管してください。

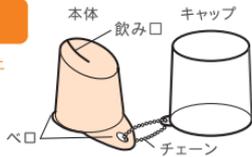

## 飲みかた

ご使用前に、必ず十分に洗浄してください。

飲み口に口をつけて、  
かるく噛むように飲んでください

※ シリコン特有のにおいを感じる場合があります。  
気になる場合はたつぷりのお湯  
で30分ほど煮沸して下さい。

※ 500ml以下のペットボトルにご利用ください。




熱い飲み物はいれしないでください。熱い飲み物が直接唇  
に触れたり、口に入り、やけどの原因になります。また、  
飲み物が漏れ、やけどやものを汚す原因になります。



## セットのしかた

ご使用前に、必ず十分に洗浄してください。

- ① 製品の下部を図のように折り返し、  
ボトルの口に製品を深く押し込みます。
- ② 本体のペロを持ち、①で折返した  
部分を元に戻します。

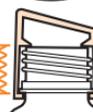

※ ペットボトルのキャップベースが隠れるよう  
にしっかりとかぶせてください。取り付け  
後は、**MM**部を指でまんべんなく押  
さえ、浮きがないことをお確かめください。

※ ご使用になる前に、製品を取り付けたペットボトルを逆さに  
してもれない事を確認してください。もれた場合は、再度  
セットしなおしてください。

※ 飲み口は、水漏れを防ぐため微細な隙間となっております。  
また、材質の特性上、密着力が強く、まれ  
に飲み口が開きにくい場合があります。  
爪楊枝を飲み口の凹み中央部分にあて  
図のおさえて飲み口を開いて下さい。



フタをしたまま こぼれない 寝たまま飲める びたっと密着

- 特許取得の独自構造でそのまま飲める
- ふってもたおれても、逆さにしてもこぼれない
- やわらかいシリコンゴムでのみやすい
- 煮沸消毒・薬液消毒ができて衛生的



ケース:PET

AK02C ペットボトルタイプ キャップ付  
部品名 材質 耐熱温度  
本体 シリコンゴム -30℃～200℃  
キャップ ポリプロピレン -20℃～120℃  
チェーン 真鍮

取扱上の注意：火のそばに置かないでください。

有限会社アイ・シー・アイデザイン研究所  
〒570-0021 大阪府守口市八雲東町2-82-21-705  
TEL.06(6909)5095(代)

特許取得済  
MADE IN JAPAN

## お手入れについて

- ・ 使用後は、すぐにぬるま湯につけよく洗浄してください。長時間放置したままですと果汁などの色や臭いが付着する場合があります。
- ・ 洗浄する時は、柔らかいスポンジと台所用洗剤できれいにあらってください。研磨剤入りのナイロンたわし、粒子の粗いクレンザーなどを使用するとキズがつくことがありますのでご注意ください。
- ・ 本体とキャップをチェーンから取り外しそれぞれを洗浄してください。
- ・ 汚れが落ちにくい時は、台所用酸素系漂白剤を各漂白剤指定の濃度に薄めて使用ください。
- ・ 煮沸消毒をする時は、洗浄後たつぷりのお湯で2～3分位行ってください。また、薬液消毒をするときは、各消毒液の使用法に従いご使用ください。
- ・ 過度の漂白、煮沸消毒、薬液消毒は製品を早く傷めますのでご注意ください。

## ご使用上の注意



注意

- ・ 飲み物を飲むためのものです。それ以外の目的には使用しないでください。
- ・ 製品の性質上、小さな傷がもともと製品が破れたり裂けたりすることがあります。また、強い力でかんだり、製品を無理に伸ばしたり、飲み口を無理に開いたり、飲み口に指や物を入れたりしないでください。破損の原因になります。
- ・ ご使用の度に、亀裂やキズなどの異常がないか確認してからご使用ください。製品にひび割れ、亀裂、キズが生じたり著しく変形した場合はすぐに使用を中止してください。
- ・ 500ml以下のペットボトルにご利用ください。ペットボトルの種類によって取り付けられないものもあります。また、金属製のボトルには使用しないでください。破損の原因となります。

- ・ 古くなると弾力性がなくなり破れやすくなります。
- ・ 製品をセットした状態で長時間飲み物をそのままにしないでください。
- ・ 製品を取り付けたペットボトルを高温の場所に放置したり、温めたりしないでください。
- ・ 炭酸飲料、果肉入りの飲料、お茶の葉入りの飲料、熱い飲料には使用しないでください。
- ・ 製品をペットボトルに取り付けた状態でかばんなどに入れて持ち運ぶ際は、万一の漏れを防ぐためにペットボトルを縦置きに入れてください。
- ・ 持ち運ぶ際は、必ずペットボトルを持って運んでください。製品に紐などを通しふらさげて携帯したり、また、製品を振り回したり、強く引っ張ったりしないでください。破損の原因になります。
- ・ 小さな部品があります。誤って飲み込む恐れがありますので、必ずセットしてご使用ください。
- ・ 火のそばに置かないでください。

## キャップについて

本体の飲み口部先端とキャップがあたらぬようにセットしてください。



※ 強く押し込まないでください。  
先端部が折れ曲がると飲み口が開き、  
漏れの原因になります。

本製品は消耗品です。1年を目安に、キズ、破損、表面のザラツキをご確認ください。安全にご使用いただくため、該当する場合は使用を中止してください。

製品の品質には万全を期しておりますが、万一不具合が生じた時や製品に関するご質問やご不明な点は下記までお問い合わせください。

製造・販売元

有限会社アイ・シー・アイデザイン研究所  
TEL.06(6909)5095(代) 大阪府守口市八雲東町2-82-21-705 〒570-0021  
受付時間 10:00～12:00/13:00～17:00(土・日・祝日は除きます)  
<http://www.ici-design.co.jp/>